

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ


ELEGANTE 882 PLEŤOVÝ PEELING + DARSONVAL

Model 862 HF/M-882




Dovozce

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2024

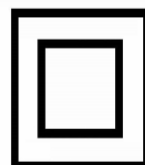

Technické údaje:

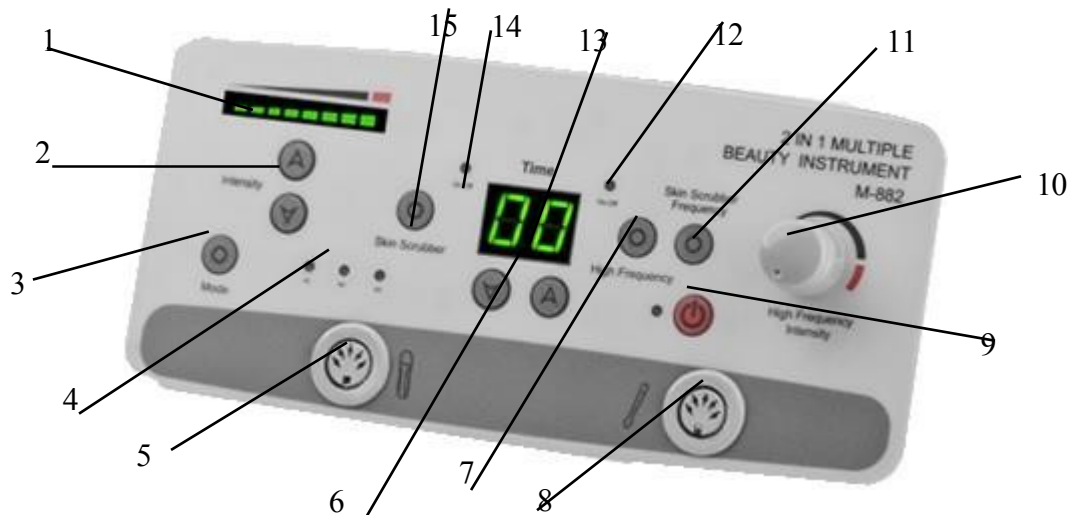

1. Index intenzity
2. Ovládání intenzity
3. Výběr možnosti ošetření kavitačním peelingem (M1- kavitační peeling, M2- sonoforéza, M3- soboforéza s mikromasáží.
4. Operační světlo pro příslušnou možnost kavitačního peelingu,
5. Připojení kavitačního peelingu,
6. Nastavení provozní doby,
7. Volba možnosti léčby - darsonval,
8. Připojení darsonwala,
9. Spuštění/zastavení darsonvalového/kavitačního peelingu,
10. Úprava intenzity darsonvalu,
11. Nastavení výkonu špachtle pro kavitační peeling
12. Darsonwala pracovní světlo
13. Zobrazení času,
14. Kavitační peelingové pracovní světlo,
15. Volba způsobu ošetření - kavitační peeling

DARSONWAL

D'Arsonvalovy proudy jsou jednou z variant vysokofrekvenčních proudů. Zařízení produkuje ozon pomocí elektrostatických výbojů vznikajících v peletách.

Působení d'Arsonvalových proudů je založeno především na účinku na cévy a vegetativní nervová zakončení. Jiskření, ke kterému dochází mezi elektrodou a kůží, způsobuje rozšíření cév a ovlivňuje podkožní tkáň. Vznikající ozon má dezinfekční účinek. V přístroji jsou na výběr 3 pelety. Ošetření se provádí po dobu 5 až 7 minut.

INDIKACE:

- Kožní smyslové poruchy,
- Alopecie areata,
- Stimulace oběhového systému,
- Dezinfekce kůže,

KONTRAINDIKACE:

- Těhotenství
- Hypertenze
- Otoky
- Nervová hyperaktivita
- Srdeční choroby
- Zánětlivé stavy kůže
- Horečka
- Astma

- Epilepsie
- Kovové implantáty
- Akné rosacea
- Rozšířené cévy
- Alergické kožní onemocnění

Návod k použití

1. Připojte rukojeť darsonwala ke vstupu č. 8.
2. Pomocí tlačítka 6 nastavte dobu ošetření.
3. Stiskněte tlačítko 7, rozsvítí se kontrolka připravenosti darsonwala (12).
4. Pomocí voliče (10) nastavte intenzitu ošetření.
5. Stisknutím tlačítka 9 zahájíte ošetření.

Kavitační peeling je v podstatě bezbolestné čištění pokožky pomocí ultrazvukových vibrací. Umožňuje důkladné odstranění přebytečného kožního mazu z pórů a vlasových folikulů a také zbavení černých teček. Při peelingu dochází k jevu kavitace, ke kterému dochází při kontaktu ultrazvuku s tekutinou, následně se vytvoří mikroskopické bublinky plynu a řada chemických procesů, které vedou k rozpadu odumřelých buněk rohové vrstvy.

INSULTS

- Ovál obličeje a lifting brady,
- Zpevnění struktury pokožky,
- Vyhlazení povrchových vrásek,
- Redukce "váčků" pod očima a "kuřích ok",
- Rekonstrukce kolagenu,
- Terapie proti stárnutí - prevence,
- Redukce nečistot, rozšířených pórů,
- Zpevnění struktury pokožky.
- Čištění pleti.

Návod k použití

1. Připojte kavitační loupací špachtli ke vstupu 5,
2. Pomocí tlačítka 6 zvolte dobu ošetření,
3. Tlačítkem 3 vyberte typ ošetření,
4. Tlačítkem 2 zvolte intenzitu ošetření (na displeji 1. se zobrazí indikátor intenzity),
5. Stiskněte tlačítko 15, rozsvítí se kontrolka připravenosti na loupání kavitace (14),
6. Stisknutím tlačítka 9 zahájíte ošetření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Zařízení se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:
 - a) do spotřebiče vnikla tekutina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení spotřebiče nebo k poškození krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte jednotku na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když s přístrojem skončíte.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost zařízení, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

POZNÁMKY:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných závad kontaktujte autorizovaným servisním střediskem, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž, jak zařízení bezpečně používat, aby byla pochopena související rizika.
3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES

Pokud jde o odpadní elektrická a elektronická zařízení, musí být elektroodpad sbírán odděleně a předáván do sběrných míst pro odpadní elektrická a elektronická zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdávány na příslušných sběrných místech a lze je odevzdat také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C, a to pouze v originálním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.