


ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Kosmetická ultrazvuková špachtle
Elegante 857

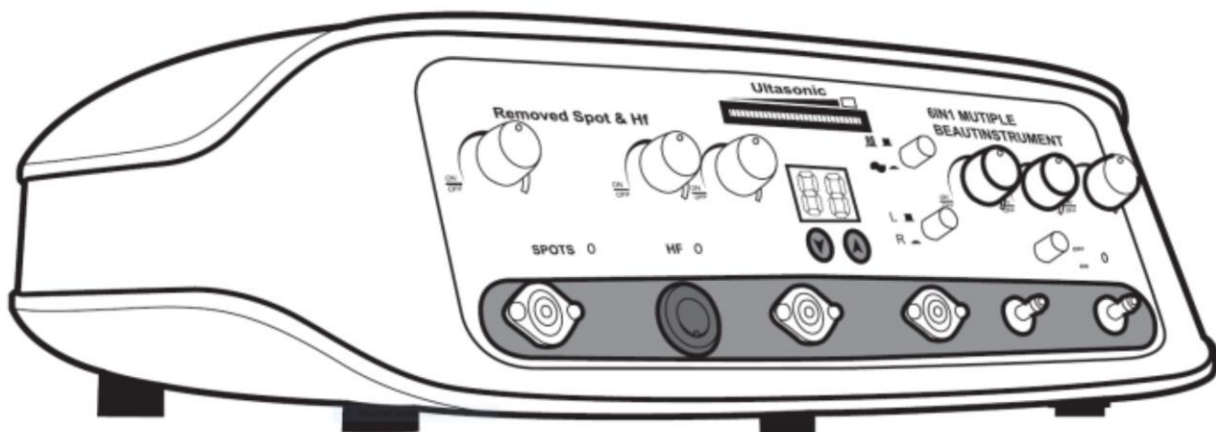

Importer:

ACTIV Tomasz Pacholczyk
ul. Graniczna 8b, bud. DC 1
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A 05/2019



Bezpečnostní opatření

Před použitím přístroje si přečtěte návod a pravidla používání.

- Pokud se cítíte nepříjemně nebo pociťujete neobvyklou bolest, okamžitě přístroj vypněte a přestaňte jej používat.
- Nepoužívejte přístroj na dětech nebo v prostorách, kam mají děti volný přístup.
- Spotřebič sami nerozebírejte. Vadný výrobek odneste do specializovaného servisního střediska.
- Po ukončení práce se spotřebičem vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Nepoškozujte napájecí kabel ani jej jinak neohrožujte. V případě poškození vyměňte kabel za nový.
- Při zahájení používání spotřebiče nenastavujte na začátku příliš vysoký výkon.
- Pokud vás v důsledku používání spotřebiče zčervená nebo svědí pokožka, přestaňte spotřebič používat, dokud se problém nevyřeší.
- Pokud se na panel spotřebiče dostane voda, okamžitě jej přestaňte používat a odneste výrobek do servisního střediska.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti očí nebo očního důlku.

Úvod do ošetření pleti peelingem - kavitační peeling.

Cílem ošetření je exfoliace odumřelé a zrohovatělé epidermis, odstranění vrstvy nečistot, odstranění a snížení sekrece kožního mazu a vyhlazení pokožky.

Návod k použití

Příslušenství

Kavitační peelingová hlava

Zapojte hlavu do správné zásuvky. Stiskněte tlačítko označené "skin scrubber" a červeným tlačítkem spustíte činnost špachtle. Hlavice nabízí tři provozní režimy: kontinuální (kavitační peeling - udržujte úhel 45° vůči povrchu pokožky, sonoforéza, mikromasáž. Před použitím hlavice musí být pokožka navlhčená. Ošetření by mělo trvat přibližně 10 minut. . Intenzitu vibrací lze nastavit pomocí tlačítek "intenzita".

Bezpečnostní opatření

1. Kontraindikace zákroku: těhotenství, poranění, odřeniny kůže, plísňové léze, bakteriální virové léze, epilepsie, infekce, části kůže, pod kterými je kov, části kůže, pod kterými jsou lékařské nebo elektronické přístroje, cukrovka, hypertenze. Nemoci Srdeční onemocnění.

2. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby se do hlavy nedostala voda.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- 1 Příklad je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabráňuje nežádoucím účinkům při ošetření.
 2. Příklad se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití.
 3. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).
- Příklad neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - do přístroje by se neměly dostat žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis firmy ACTIV Tomasz Pacholczyk:
(a) do přístroje vnikla tekutina, (b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, (c) došlo k poškození napájecího kabelu, (d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
 5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
 6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
 7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
 8. Příklad nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
 9. Aby byla zaručena životnost spotřebiče, doporučuje se dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
 10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na výrobním štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

POZOR:

V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.

- (2. Tento přístroj je určen k používání dětmi ve věku nejméně 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je nad nimi vykonáván dohled nebo jsou poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby pochopily související rizika.
- 3 Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
- 4) Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud jsou přítomny děti nebo osoby, které nejsou dostatečně obeznámeny s používáním spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a uchovávan mimo dosah dětí.
6. Při používání spotřebiče je třeba dbát na to, aby byl v bezpečí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použitá elektrická spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v ekologických recyklačních centrech. Elektrická spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. musí být použítá elektrická a elektronická zařízení sbírána odděleně a odvážena do sběrných míst pro použítá elektronická a elektrická zařízení. Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k opětovnému zpracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Příklad by měl být přepravován při teplotách v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Příklad by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.