

## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

### Vysavače čených teček s mikrodermabrází



## INFORMACE O PRODUKTU

Tento multifunkční nástroj na čištění černých teček využívá neinvazivní vakuovou podtlakovou technologii. 3 různé režimy sání jsou navrženy pro 3 různé typy pleti, které mohou hluboce absorbovat černé tečky, přebytečný maz, akné a nečistoty na pokožce. Aby vyhovoval různým potřebám použití, je vybaven 6 různými hroty. Čistí pleť ve všech směrech a jemně pleť nadzvedává, zmenšuje póry, zlepšuje vylučování kožního mazu, zvyšuje elasticitu pleti, pleť je čistší a hladší.

Vlastnosti: 1.3 Režimy odsávání: Podle různých typů pleti vhodně navržené režimy odsávání pro suchou pleť, mastnou pleť a smíšenou pleť.


2. 6 funkčních vysavačů: Aby byly splněny různé potřeby sání černých teček, čištění pórů a mikrodermabraze, je speciálně vybaveno 6 savami s různými funkcemi.

3. Obrazovka LED s vysokým rozlišením: Humanizovaná obrazovka LED s vysokým rozlišením okamžitě zobrazuje pracovní stav produktu, což vám pomůže produkt snadno používat.

4. Vysokokapacitní polymerové baterie: Jsou vybaveny vysokokapacitními 380m polymerovými bateriemi a nabíjecím kabelem USB. Po plném nabití vydrží v provozu 90 minut.

5. Nízká hlučnost: Maximální úroveň sání při práci neprodukuje více než 30 decibelů spánkového standardu doporučeného Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO).

## PRO VŠECHNY DRUHY PLETI

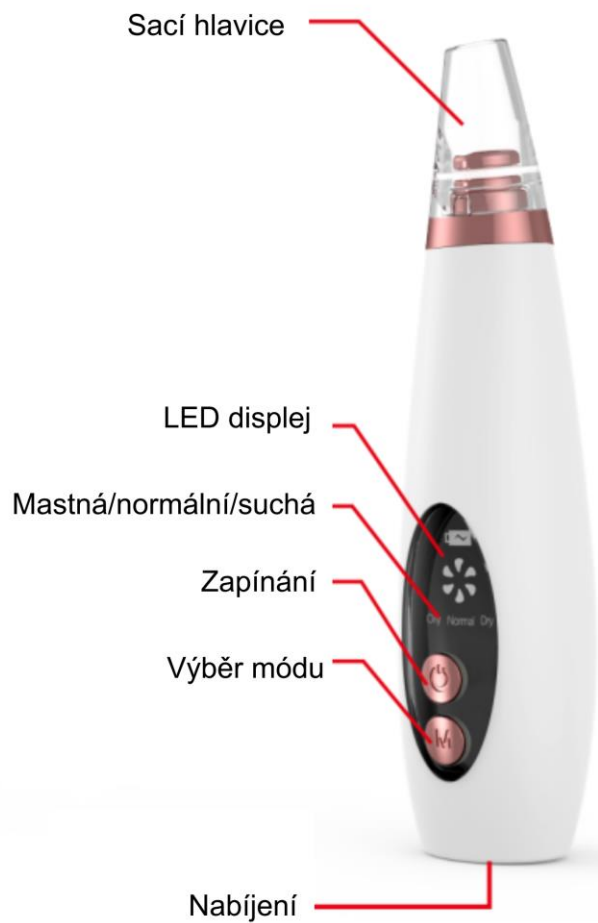

## NÁHRADNÍ HLAVICE



### OVÁLNÁ HLAVA

Používá se k redukci vrásek a zvýšení pružnosti pokožky



### MINI KULATÁ HLAVA

Vhodná pro citlivou pleť a méně černých teček



### KULATÁ HLAVA

Vhodná pro všechny typy pleti



### MALÁ KULATÁ HLAVA

Vhodná pro citlivou pokožku a slabé části pokožky



### STŘEDNÍ KULATÁ HLAVA

Používá se na mastnou pleť, odsávání černých teček a akné



### VELKÁ KULATÁ HLAVA

Slouží k odsátí černých teček a zvednutí pokožky

## POUŽITÍ

**1. Nabíjení:** Před použitím zařízení nabíjejte 6 hodin. (Červené světlo znamená nabíjení, zelené světlo znamená plné nabití)

**2. Čištění:** Při používání tohoto odstraňovače černých teček se ujistěte, že byla pokožka vyčištěna a udržujte ji v suchu

**3. Před použitím:** Použijte horký ručník a položte jej na obličej na 3-5 minut, aby se otevřely kožní póry. Můžete také použít napařovač na obličej nebo použít odstraňovač černých teček ihned po koupání.

**4. Použití:** Vyberte si vhodnou sondu podle své pleti a nainstalujte ji. Stiskněte tlačítko napájení a vyberte páčku výkonu (Oily/Normal/Dry) síly sání. Používejte v zametacích pohybech v délce 1-2 sekundy.

**5. Po použití:** Ihned po použití si umyjte obličej studenou vodou. Po umytí obličeje si můžete nasadit studený obklad nebo potřít obličej kostkou ledu pro stažení pórů.

**6. Vyčistěte sondu:** Po každém použití sondu řádně vyčistěte, abyste dezinfikovali a zabránili ucpaní filtru. Sondu můžete vyčistit 70% nebo méně alkoholem nebo omýt mýdlem

### Poznámka:

\*Tento produkt nemusí být vhodný pro tenkou, citlivou pokožku nebo pokožku s vřidky, před prvním použitím otestujte na předloktí. Pokud jste alergičtí nebo citliví na vakuovou technologii, nepoužívejte ji.

\*Při používání produktu prosím pohybujte jeho sací hlavicí v kruhovém nebo lineárním směru pomalu na pokožce a ujistěte se, že nezůstane déle než 2 sekundy pro každou oblast pokožky. V opačném případě může poranit vaši pokožku a způsobit její fialovou barvu (zejména pro citlivou pokožku), protože sací výkon je silný.

## ČASTÉ OTÁZKY

**Otázka 1:** Mohu používat zařízení při nabíjení?

**Odpověď:** Ne, prosím nepoužívejte při nabíjení. Je to bezpečnostní opatření.

**Otázka 2:** Proč mám obličej spálený od slunce nebo větrem?

**Odpověď:** Toto zařízení může způsobit zarudnutí a pocit jako spálení větrem, ale to po několika minutách zmizí. Nebojte se, toto je normální situace. Umyjte si obličej studenou vodou a naneste esenci a hydratační krém. Můžete také navázat třením kostkou ledu po celém obličej pro uzavření pórů a zklidnění pleti. Pokud se u vás objeví modřiny nebo zarudnutí trvající hodiny, bylo to proto, že držíte vakuovou sondu příliš dlouho na jednom místě, postupujte podle správných kroků a ujistěte se, že nezůstane déle než 2 sekundy pro každou oblast pokožky.

**Otázka 3:** Mohu přístroj používat, když je vlhká pokožka?

**Odpověď:** Nepoužívejte prosím na mokrou pokožku. Vzhledem k tomu, že vlhká pokožka nevytváří vakuové prostředí s nástrojem na černé tečky, ovlivní to účinek použití. Také všechna elektrická zařízení se doporučuje používat v suchém prostředí.

**Otázka 4:** Mohu používat zařízení a gel na odstranění černých teček společně s nástrojem?

**Odpověď:** Ano, před použitím produktu použijte horký parní hrnec nebo horký ručník nebo gel/krém na odstranění černých teček na kůži po dobu 5 minut, aby se nejprve úplně otevřely póry. U některých těžko odstranitelných černých teček doporučujeme použít gel na odstranění černých teček a sadu nástrojů společně, abyste dosáhli nejlepšího výkonu.

## PARAMETRY

Název produktu	Vysavač černých teček	Provozní napětí	5V
Sací síla	≤ 62KPa	Nabíjecí napětí	5V
Čas používání	Plně nabyto	Příkon	2.5W
Certifikát	CE & ROHS	Jmenovité napětí	3.7V
Typ baterie	Polymerová baterie	Kapacita baterie	380 mA

## OBSAH BALENÍ

1



Zařízení

2



Hlavy

3



USB kabel

4



Manuál