

# ACTIVESHOP®

## NÁVOD K POUŽITÍ


Saeyang Marathon Cyclone podiatrická frézka s  
absorbérem



Dovozce: ACTIVESHOP  
Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polsko  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/04/2024




Názvy a funkce součástí

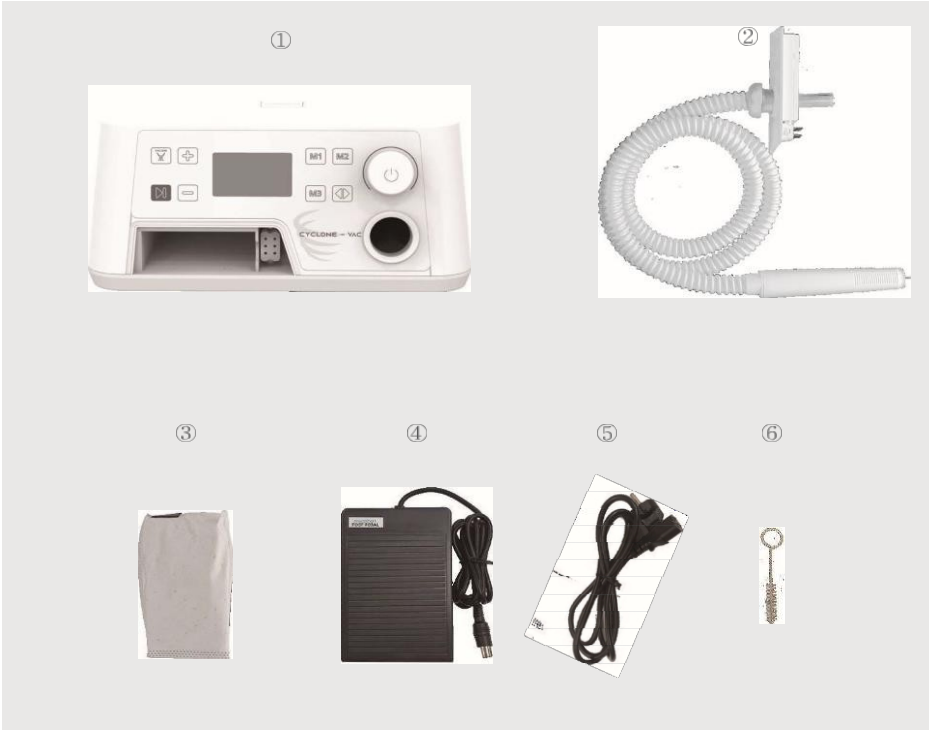


|   | Název           | Funkce                                    |
|---|-----------------|-------------------------------------------|
| 1 | Řídicí jednotka | Řízení otáček, směru otáčení atd.         |
| 2 | Pracovní hlava  | Pracovní část                             |
| 3 | Prachový sáček  | Ukládání prachu nasávaného hlavou         |
| 4 | Nožní ovládání  | Nožní spínač pro ovládání rychlosti hlavy |
| 5 | Napájecí kabel  | Napájení frézky                           |


|   |                               |                                |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| 6 | Nástroj na<br>čištění kleštin | Nástroj na čištění konců hlavy |
|---|-------------------------------|--------------------------------|

## Konstrukce zařízení

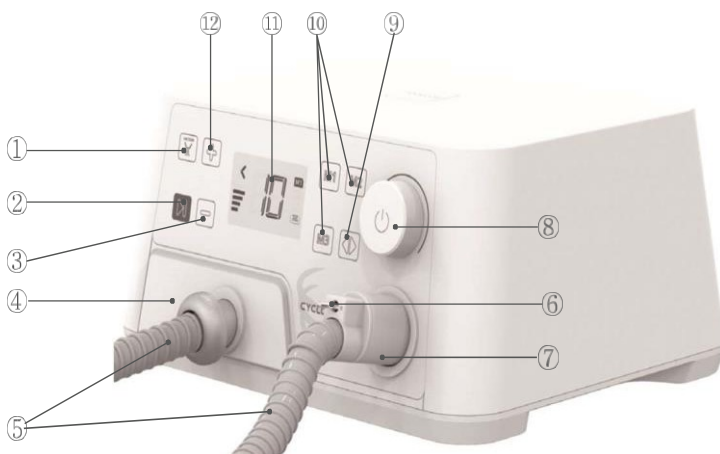

|    | Název                                    | Funkce                                                                     |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tlačítko zapnuto/vypnuto sání            | Zapnutí/vypnutí absorbéru                                                  |
| 2  | Tlačítko Start/Stop                      | Zapnutí/vypnutí sacího motoru a hlavy                                      |
| 3  | Tlačítko pro snížení sacího výkonu       | Snížení výkonu absorbéru                                                   |
| 4  | Kryt prachového sáčku                    | Držák/kryt prachového sáčku                                                |
| 5  | Sací hadice                              | Odsávání prachu do sáčku                                                   |
| 6  | Vypínač                                  | Aktivace/deaktivace sání a provoz pracovní hlavy                           |
| 7  | Hlava                                    | Pracovní část                                                              |
| 8  | Tlačítko a rychlá volba                  | Zapínání/vypínání LCD displeje a zvyšování/snižování jeho hodnoty rychlost |
| 9  | Tlačítko pro změnu směru otáčení trsátka | Nastavení směru otáčení sběrače                                            |
| 10 | Tlačítko paměti                          | Uložení nastavení                                                          |
| 11 | LCD                                      | Zobrazení stavu                                                            |
| 12 | Tlačítko pro zvýšení sacího výkonu       | Zvýšení rychlosti absorbéru                                                |

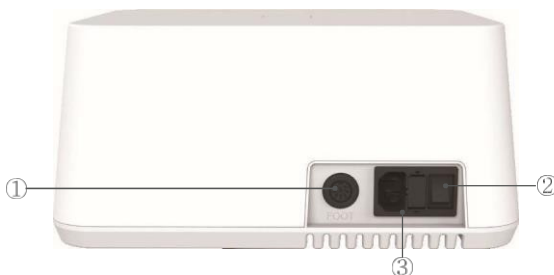

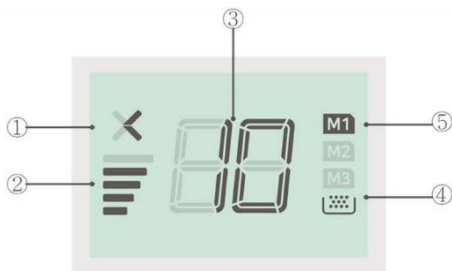

|   | Název                       | Funkce                      |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Konektor pro nožní ovládání | Připojení nožního ovládání  |
| 2 | Tlačítko napájení           | Zapnutí/vypnutí napájení    |
| 3 | Napájecí konektor           | Připojení napájecího kabelu |

## LCD displej

1.

2.

3.

4.

5.



1. Směr otáčení hlavy (otáčení doprava, otáčení doleva).
2. Rychlost hlavy
3. Sací výkon
4. Ikona prachového sáčku (výměna prachového sáčku za nový).
5. Paměť

|   | Název              | Funkce                                |
|---|--------------------|---------------------------------------|
| 1 | Směr otáčení hlavy | Zobrazení směru otáčení motoru        |
| 2 | Sací výkon         | Indikátor úrovně výkonu sacího motoru |

|   |                        |                                                     |
|---|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3 | Rychlost hlavy         | Zobrazení rychlosti hlavy<br>(x1000,<br>400 ~40000) |
| 4 | Ikona prachového sáčku | Upozornění na nutnost výměny<br>prachového sáčku    |
| 5 | Paměť                  | Zobrazení čísla uložené<br>paměti                   |

### Pozor


Pokud je funkce vysávání používána celkem alespoň 10 hodin, zobrazí se ikona výměny prachového sáčku. Po výměně prachového sáčku podržte tlačítko zapnutí/vypnutí sání po dobu 2 sekund, aby se ikona výměny prachového sáčku odstranila.

### Instalace

| Pozor                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prostředí instalace (elektrické vlastnosti, vlastnosti umístění, teplota, vlhkost atd.).                                                                                 | Pozor při instalaci                                                                                                                                                                                                                         |
| Řídicí jednotka musí být používána na místě, kde je udržována vhodná vnitřní teplota. (0~40°C)<br>Nepoužívejte přístroj na znečištěném nebo velmi horkém a vlhkém místě. | Řídicí jednotka musí být nainstalována na rovném povrchu, bez rušení od periferních zařízení.<br>- Neblokujte větrání spodní desky. řídicí jednotka. Nepoužívejte výrobek na místě, kde je obtížné zajistit napájení nebo oddělit zástrčku. |

## 1-1. Hlavní napájecí zdroj

## Pojistková skříňka

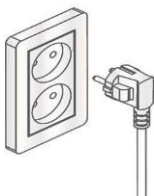

Pojistka


- ① AC 220-240V, 50/60Hz
- ② 3,15 A 250 V

Náhradní pojistka je ukryta v pojistkové skříňce ve vestavěné části.

## Připojení

### 1. Ruční díl, připojení sáčku na prach

Připojte konektor vybavený prachovým sáčkem k sacímu otvoru.

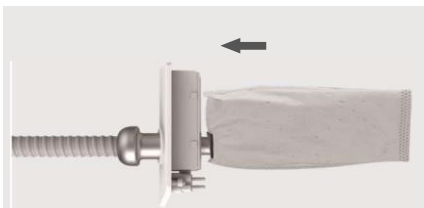

### 2. Připojení přívodního kabelu

Připojte napájecí kabel k zadní straně přístroje.

## Montáž frézy

Přípevněte řezačku podle následujícího obrázku.



## Pozor

Velikost frézy/nosiče musí být pečlivě přizpůsobena otáčkám. Špatně dimenzovaná fréza může způsobit nežádoucí vibrace a následné poškození hlavy.

Během provozu nenanášejte kapalinu přímo na hlavu nebo nůž. Kapalina může být nasáta skrz řeznou hlavu, což může vést k poškození nože.


## Použijte

### Příprava před použitím

- Zkontrolujte, zda jsou součásti frézky správně připojeny.

### Zapnutí/vypnutí napájení

1. Nastavte vypínač napájení do polohy "-", abyste z a p n u l i napájení jednotky.
2. Nastavením vypínače napájení do polohy "o" vypněte napájení jednotky.
3. Pokud stisknete a podržíte rychlou volbu, můžete zapnout a vypnout displej LCD a napájení.

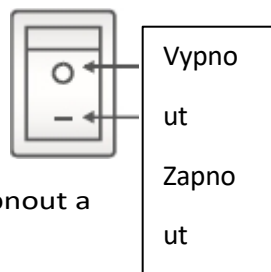

## Nastavení

Zapnutí/vypnutí odsávání a nastavení výkonu

1. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí odsávání určete, zda má být použita funkce odsávání.
  2. Stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení sání zvolte požadovaný výkon.
-



### Nastavení rychlosti

1. Otáčením voliče rychlosti nastavte rychlost.
2. Rozsah rychlosti: 4 000 ~ 40 000 otáček za minutu

### Nastavení směru otáčení sběrače


1. Stisknutím tlačítka pro změnu směru otáčení nože zvolte směr otáčení.

### Nastavení paměti

1. Stisknutím paměťového tlačítka na 2 sekundy uložíte nastavenou hodnotu.
2. Krátkým stisknutím paměťového tlačítka vyvoláte uložený záznam. **nastavení.**

### Hlava, sání/stop

1. Stisknutím tlačítka Start&Stop zahájíte práci.
2. Stisknutím tlačítka Start&Stop během provozu jej zastavíte.
3. Pokud se během provozu násadce a odsávání vypne spínač na zadní straně násadce, násadec a odsávání se dočasně zastaví a na displeji bliká ikona rychlosti.
4. Když je spínač zapnutý, funguje hrot a sání.
5. Zapnutí/vypnutí odsávání a sací výkon, směr otáčení, paměť atd. lze ovládat za provozu hlavy.

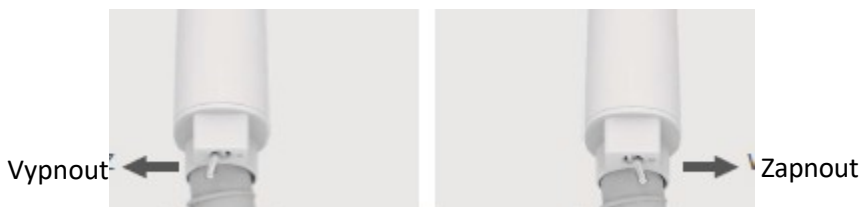

### Pozor

Pokud se během používání vyskytnou abnormality, okamžitě přerušete práci a přerušete napájení výrobku.

### Použití funkce nožního ovládání

Nožní ovládání umožňuje plynule regulovat počet otáček až do maxima nastaveného na frézce.

Pro použití nožního ovládání musí být frézka zastavena tlačítkem Start&Stop a aktivován spínač na hlavě.

Pozor

Nožní ovládání: Rychlost je možné upravit nastavením rychlosti nastaveného hrotu na maximální rychlost.

## Údržba

### Omezení opakovaného použití

Po použití výrobku je třeba všechny součásti vyčistit. Cizí látky ze všech součástí ihned odstraňte měkkým hadříkem.


### Příprava na čištění

Pokud je motor hlavy stále upevněn v krytu - opatrně jej vysuňte. V žádném případě netahejte za kabel. Hrozí nebezpečí poškození hlavice.



### Způsob čištění

Měkkým kartáčem odstraňte cizí tělesa z krytu hrotu a motoru.

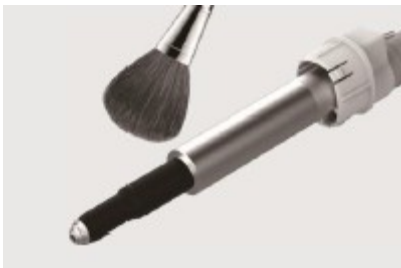

Použijte nástroj na čištění kleštin, abyste odstranili cizí látky uvnitř kleštinového sklíčidla motoru.



## Pozor

K čištění přístroje nepoužívejte vroucí vodu, chemikálie, drátěné kartáče ani ultrazvukové vlny.

Po přibližně 10 hodinách používání výrobku vyměňte prachový sáček.

## Úložiště

### Vizuální kontrola

1. Zkontrolujte, zda jednotka není zkorodovaná.
2. Kontrola viditelných cizích těles
3. Zkontrolujte viditelné poškození
4. Po vyčištění výrobek znovu sestavte a uložte na určené/čisté místo.

## Výměna prachového sáčku

Jakmile se na displeji LCD rozsvítí ikona výměny sáčku, vyměňte prachový sáček za nový. Po výměně prachového sáčku stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí sání po dobu 2 sekund, aby ikona výměny prachového sáčku zmizela.

## Problémy

### Chyby

- Pokud dojde k chybě, zobrazí se na displeji chybový kód, který umožní okamžitou diagnostiku problému.

| Kód chyby | Popis chyby                        | Působení proti                                                      |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| E1        | Problém s připojením hlavy         | Odpojte hlavu a znovu ji připojte                                   |
|           |                                    | Pokud problém není vyřešen, kontaktujte nejbližšího prodejce.       |
| E2        | Problém s připojením ovládání noha | Znovu připojte nožní spínač                                         |
|           |                                    | Pokud problém není vyřešen, kontaktujte nejbližšího prodejce.       |
| E3        | Přetížení hlavy                    | Vypnutí a opětovné zapnutí zařízení                                 |
|           |                                    | Zkontrolujte, zda se v upínacím sklíčidle nenacházejí cizí tělesa.  |
|           |                                    | V případě opakovaného výskytu E3 kontaktujte nejbližšího prodejce.  |
| E4        | Přetížení absorberu                | Zařízení vypněte a po chvíli znovu zapněte.                         |
|           |                                    | Výměna prachového sáčku                                             |
|           |                                    | V případě opakovaného výskytu E4, kontaktujte nejbližšího prodejce. |

## Technické údaje

### Specifikace produktu

| Kategorie | Standardní | Specifikace |
|-----------|------------|-------------|
| Hlava     | Hmotnost   | 364g        |

|                 |                            |                      |
|-----------------|----------------------------|----------------------|
| Řídicí jednotka | Hmotnost                   | 2400g                |
|                 | Maximální otáčky za minutu | 40,000               |
|                 | Spotřeba energie           | 220-240 V~, 50/60 Hz |
|                 | Rozměry (š x d x v)        | 291mmx263mmx135mm    |

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Zařízení se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:
  - a) do spotřebiče vnikla kapalina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte jednotku na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když s přístrojem skončíte.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.

8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu se může přístroj poškodit.

9. Aby byla zaručena pevná životnost zařízení, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.

10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

#### **POZNÁMKY:**

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.

2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž, jak zařízení bezpečně používat, aby byla pochopena související rizika.

3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.

4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, p r o t o by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí. **LIKVIDACE SPOTŘEBIČE**



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Postupujte podle

.....ýkající se likvidace tohoto typu zařízení. Za účelem ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a

Elektronický odpad by se měl sbírat odděleně a odvážet do sběrných míst pro elektronický a elektrický odpad.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdávány na příslušných sběrných místech a lze je odevzdat také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

## **SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA**

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.