


# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## NÁVOD K POUŽITÍ

Zařízení Smart 667 Darsonval



Dovozce: ACTIVESHOP Sp. z  
o. Ó. Ulice Graniczna 8b,  
budova DC2A 54-610  
Wroclaw, Polsko  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl) Rev.  
A/07/2024

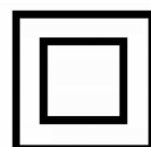


Přístroj Smart 667 Darsonval slouží k provádění ošetření pomocí vysokofrekvenčních proudů, tzv. d'Arsonvalových proudů. Tyto proudy ovlivňují především krevní cévy, stimulují oběh a obnovu pokožky. Při ošetření se uvolňuje ozón, který má silné dezinfekční vlastnosti a také stimuluje a okysličuje pokožku.

#### Technické údaje:

|           |          |
|-----------|----------|
| Napětí    | 220-240V |
| Výkon     | 25W      |
| Frekvence | 50/60 Hz |

#### Ovládací panel

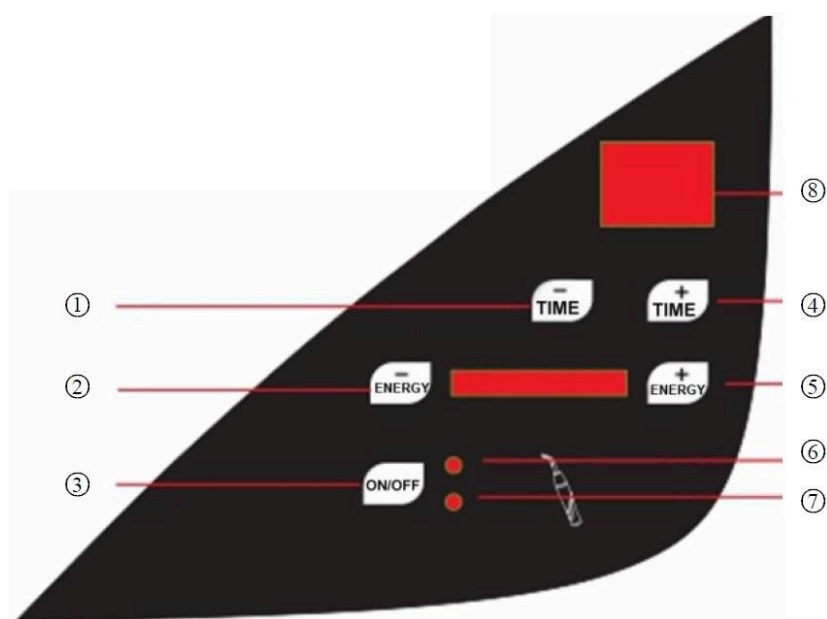

1. Nastavení času "-"
2. Úprava intenzity "-"
3. Vypínač
4. Nastavení času "+"
5. Nastavení intenzity "+"
6. Indikátor připravenosti
7. Pracovní světlo
8. Displej

#### Sada obsahuje:

- základna zařízení,
- tři ošetřovací podložky,
- Hlava,
- Napájecí kabel.

#### Indikace k postupu:

- poruchy citlivosti kůže,
- Alopecia areata,
- stimulace oběhu,
- stimulace obnovy buněk,

- Okysličení epidermis, -
- Dezinfekce kůže.

### **Kontraindikace:**

- Těhotenství, kojení
- hypertenze,
- otok kůže,
- nervová hyperaktivita,
- onemocnění srdce,
- Zánět kůže, růžovka
- Horečka,
- astma,
- epilepsie,
- Alergické stavy kůže.

### **Návod k použití:**

1. Před ošetřením si očistěte a osušte obličej. Kůže by měla být suchá.
2. Vložte příslušnou podložku do hlavy vložením kovového hrotu do otvoru.
3. Poté připojte zařízení ke zdroji napájení a stiskněte tlačítko napájení. Uslyšíte spouštěcí zvuk a na displeji se zobrazí 30 minut. Intenzita je 0, indikátor pohotovostního režimu je červený – zařízení je v pohotovostním režimu. Dobu a intenzitu ošetření lze libovolně nastavit pomocí příslušných tlačítek.
4. Stiskněte tlačítko napájení, indikátor připravenosti se rozsvítí zeleně a provozní kontrolka bude blikat.
5. Nastavte nejnižší výkon, poté přiložte podložku na pokožku a teprve poté upravte výkon přístroje. Přesuňte podložku po kůži.
6. Neprovádějte proceduru na očních víčkách. Postup kolem očí by měl být prováděn velmi opatrně. a pouze na nejnižší výkon.
7. Před sejmutím vložky z pokožky snižte výkon na minimum, vypněte přístroj a teprve potom podložku odsuňte od obličeje.
8. Při montáži a demontáži podpěr musí být zařízení vypnuto.
9. Procedura by měla trvat asi 5-10 minut.

Intenzita ošetření by měla být vždy přizpůsobena pocitům klienta.

### **Typy podložek:**

„Houba“ peleta – používá se na rovné povrchy, např. obličej, výstřih, záda.

Hřeben Pelota – určený na pokožku hlavy. Urychluje proces regenerace a uzavírá vlasové šupiny.

„Teardrop“ (bodová) peleta – určená pro těžko dostupná místa, např. kolem nosu a uší.

### **BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem pomáhá předejít nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Zařízení nerozebírejte ani se jej nepokoušejte použít k jinému účelu, než je uvedeno v tomto návodu. Veškeré servisní a opravárenské práce musí provádět pouze oprávněný servisní pracovník (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Neinstalujte ani neprovozujte zařízení v blízkosti kapalin, vlhkých míst nebo s mokřýma rukama. – aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.
4. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizované servisní středisko společnosti ACTIVESHOP Sp. z o. Ó. v následujících případech:
  - a) do zařízení vnikla kapalina,
  - b) zařízení vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává podivné zvuky,

c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převrácení zařízení nebo poškození jeho krytu.

5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte spotřebič na místo, kde by lidé mohli šlapat na napájecí kabel.

6. Z bezpečnostních důvodů vždy po použití zařízení odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

7. Do otvoru v zařízení nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, odpojte napájecí kabel a kontaktujte distributora nebo výrobce.

8. Neumisťujte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu se zařízení může poškodit.

9. Aby byla zaručena nastavená životnost zařízení, doporučuje se počkat jednu minutu, než znovu stisknete tlačítko napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).

10. Napájecí zdroj musí odpovídat údajům na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávné funkce zařízení, poškození nebo dokonce popálení.

POZOR:

**1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných závad kontaktujte autorizované servisní středisko, abyste předešli nebezpečí.**

2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let nebo starší, osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi a osoby, které nemají zkušenosti a znalosti o zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instrukce týkající se bezpečného používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.

3. Zařízení není určeno pro použití dětmi. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.

4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud jsou v blízkosti děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o tom, jak zařízení používat.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto musí být zařízení používáno a skladováno mimo dosah dětí.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ



Použitá elektrická zařízení, příslušenství a obaly by měly být zaslány do recyklačních středisek v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Dodržujte prosím pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. Za účelem ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

elektrická zařízení je nutné sbírat odděleně a následně je odevzdat do sběren použitých elektronických a elektrických zařízení. Staré přístroje po skončení životnosti obsahují i plně funkční recyklovatelné komponenty, proto je třeba je poslat k recyklaci. Proto by měly být předány na příslušná sběrná místa a mohou být také předány společnosti ACTIVESHOP Sp. z o. Ó.

## SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotách mezi (–) 20 °C a (+) 50 °C pouze v původním obalu. Zařízení skladujte na dobře větraném místě s relativní vlhkostí do 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy zařízení nesmí být vrženo nebo upuštěno nebo vystaveno mechanickým otřesům nebo atmosférickým vlivům.