

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

ELEGANTE 1897 ZAŘÍZENÍ 5V1 MIKRO + VAKUUM + DARSONVAL + ULTRAZVUK + SPREJ

Model M-1897





Dovozce

ACTIV Tomasz Pacholczyk ul.
Graniczna 8b, budova DC2A
54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/02/2020

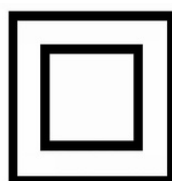

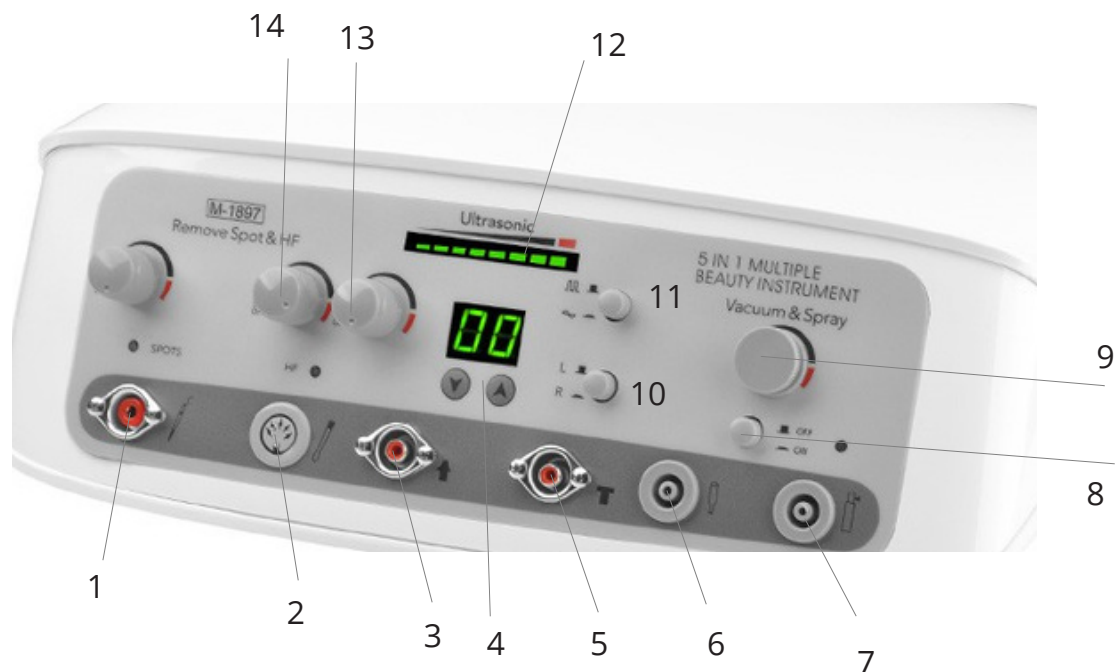

1. Připojení elektrokoagulace
2. Darsonval
3. Připojení ultrazvukové hlavice
4. Nastavení času
5. Připojení ultrazvukové hlavice
6. Vakuové připojení a mikrodermabraze
7. Sprejové připojení
8. Zapnutí/vypnutí vakua a mikrodermabraze
9. Nastavení sacího výkonu
10. Výběr ultrazvukové léčebné hlavice
11. Výběr ultrazvukové léčebné vlny
12. Displej intenzity ultrazvuku
13. Nastavení intenzity ultrazvuku
14. Nastavení intenzity darsonwala

DARSONVAL

d'Arsonvalovy proudy jsou jednou z odrůd vysokofrekvenčních proudů. Zařízení produkuje ozón pomocí elektrostatických výbojů vyskytujících se v peletách.

Působení d'Arsonvalových proudů je založeno především na působení na cévy a vegetativní nervová zakončení. Jiskra, která vzniká mezi elektrodou a kůží, způsobuje rozšíření cév a ovlivňuje podkoží. Vzniklý ozón má dezinfekční účinek. Procedura trvá 5 až 7 minut.

KONTRAINDIKACE:
INDIKACE:

- Poruchy citlivosti kůže,
- Alopecia areata,
- Stimulace oběhového systému,
- dezinfekce kůže,

Těhotenství
Hypertenze
Otok
Nervová hyperaktivita
Srdeční choroba
Zánět kůže
Horečka
Astma
Epilepsie
Kovové implantáty
Rosacea
Rozšířené krevní cévy
Alergické kožní stavy

ULTRAZVUKY

Jde o systém pro transport aktivních látek hluboko do pokožky. Přístroj využívá fyzikální jev vyskytující se v buněčných membránách pod vlivem ultrazvuku, díky kterému efekt jediného ošetření zůstává v kůži až 72 hodin.

Ošetření je zcela bezbolestné, při ošetření může klient cítit jemné vibrace vycházející z hlavy.

Sprej

Slouží k jemnému tonizaci pleti pomocí vakuového tlaku a tonika obsaženého v nádobce.

MIKRODERMABRAZE

Jedná se o ošetření, při kterém exfoliujeme povrchové vrstvy epidermis pomocí brusných diamantových hrotů a sací síly.

Mikrodermabraze je účinné ošetření pro redukci jemných vrásek, vrásek, zbarvení a jizev po akné. Stimuluje stavbu kožních buněk a kolagenu. Jedná se o velmi oblíbené neinvazivní kosmetické ošetření. Při pravidelném používání přináší úžasné výsledky pro všechny typy pleti. Výsledky jsou patrné okamžitě.

Indikace

- jizvy po akné,
- černé tečky, milia,
- rozšířené póry,
- hrubá, keratinizovaná epidermis,
- ochablost kůže,
- omlazení pleti a odstranění jemných vrásek kolem očí, úst a krku, strie,
- suchá kůže,
- změna barvy a změna barvy,
- sluneční poškození kůže (obličej, ruce, krk),
- perifolikulární keratóza,
- acne vulgaris (komedoneální, papulární)
- seborea



Kontraindikace

- virové infekce,
- bakteriální infekce,
- plísňové infekce,
- pustulózní a pyogenní
- akné, rosacea,
- kůže očních víček,
- porušená kontinuita kůže, rakovina
- kůže a mateřská znaménka,
- kavernózní hemangiomy,
- léčba akné Roaccutanem (doporučena alespoň 3měsíční pauza), sklon ke
- keloidům (keloidům),
- chirurgické zákroky na obličeji (doporučuje se minimálně dvouměsíční pauza).

Pozor

Ošetřující hlavice pro mikrodermabrazi musí být čisté a dezinfikované. Ošetření se provádí na suché pokožce.

Bavlněné filtry pro mikrodermabrazi jsou jednorázové. Pohyby hlavy

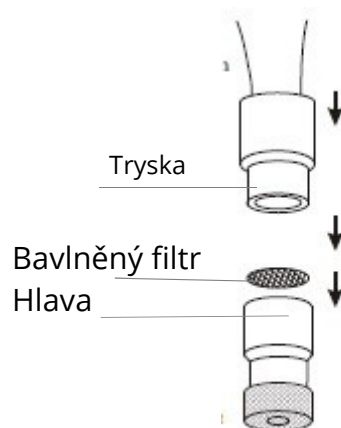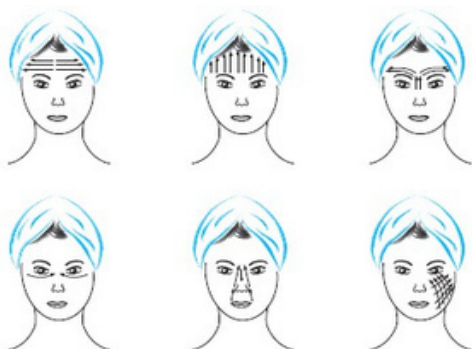

Vakuum

Jedná se o ošetření, které využívá sací sílu k vtlačení hrotu do ošetřované oblasti.

INDIKACE:

- černé tečky,
- rozšířené póry,
- hrubá, keratinizovaná epidermis,
- ochablost kůže,
- strie,
- **suchá kůže.**



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Přístroj by měl obsluhovat pouze kvalifikovaný kosmetický personál, aby se předešlo nežádoucím účinkům během ošetření. 2. Zařízení nerozebírejte ani se jej nepokoušejte používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny v této uživatelské příručce. Veškeré servisní a opravárenské práce smí provádět pouze oprávněný servisní pracovník (ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Neinstalujte a neprovozujte zařízení v blízkosti kapalin, vlhkých míst nebo s mokřýma rukama - aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.
4. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk v následujících případech:
 - a) do zařízení vnikla kapalina, b) zařízení vydává zvláštní zápach, kouří nebo vydává podivné zvuky, c) je poškozen napájecí kabel, d) došlo k převržení zařízení nebo k poškození jeho pláště.
5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte zařízení na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když dokončíte práci se zařízením.
7. Do otvoru v zařízení nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, odpojte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Neumísťujte zařízení na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu se zařízení může poškodit.
9. Pro zajištění stanovené životnosti zařízení se doporučuje ponechat před opětovným stisknutím tlačítka napájení jednu minutu (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájecí zdroj musí odpovídat údajům na typovém štítku. V opačném případě hrozí nesprávné fungování zařízení, jeho poškození nebo dokonce popálení.

POZORNOST:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch kontaktujte autorizované servisní středisko – pomůže vám to předejít riziku.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku minimálně 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi o zařízení, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o tom, jak zařízení používat v bezpečném způsobem, aby s tím byla rizika pochopitelná.
3. Zařízení není určeno pro děti na hraní. Dětem nesmí být dovoleno hrát si se zařízením.
4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o používání zařízení.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat riziko zranění nebo smrti, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Odpadní elektrozařízení, příslušenství a obaly by měly být zaslány do středisek recyklace surovin v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrická zařízení by se neměla vyhazovat do domovního odpadu. Dodržujte prosím pravidla týkající se likvidace tohoto typu zařízení. Za účelem ochrany životního prostředí v souladu se směrnici 2012/19/ES o odpadních elektrických zařízeních a



elektronická odpadní elektrická zařízení by měla být shromažďována odděleně a poté odeslána na sběrná místa pro odpadní elektronické a elektrické zařízení.

Na konci své životnosti stejně jako stará zařízení obsahují cenné recyklovatelné komponenty, proto by měly být recyklovány. Proto je třeba je odevzdat na příslušná sběrná místa a lze je předat i společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Zařízení skladujte na dobře větraném místě s relativní vlhkostí maximálně 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení vrženo nebo upuštěno nebo vystaveno mechanickým otřesům nebo atmosférickým vlivům.